

<p><b>เซมากลูไทด์</b>  <b>ความแรง 0.68, 1.34, 2.27, 3.2 มิลลิกรัม</b>  <b>ต่อ 1 มิลลิลิตร</b>  <b>ชนิดสารละลายสำหรับฉีด</b>  <b>บรรจุในปากกาฉีดยา</b>  <b>ชื่อการค้า Wegovy® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 mg FlexTouch®</b>  <b>(วีโกวี® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 มิลลิกรัม</b>  <b>เฟล็กซ์ทัช®)</b></p>
--

## 1. ยานี้คืออะไร

1.1 **ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้ชื่อว่า เซ-มา-กลู-ไทด์ (semaglutide)

1.2 **ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้ร่วมกับการคุมอาหารและออกกำลังกาย เพื่อ**
  - ลดน้ำหนัก ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 ขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 27 ขึ้นไปและมีปัญหาสุขภาพ
  - ควบคุมน้ำหนัก ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีโรคอ้วน และน้ำหนักตัวมากกว่า 60 กิโลกรัม
  - ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองแตก ในผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 **ยานี้ห้ามใช้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 **ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- มีโรคเบาหวาน
- มีโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน
- มีโรคตับหรือโรคไตอย่างรุนแรง
- มีโรคหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง
- อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด และผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอื่น

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร**

**ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

## 3. วิธีใช้ยา

3.1 **ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ฉีดยานี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยฉีดวันเดียวกันของทุกสัปดาห์
- ฉีดยาในเวลาใดของวันก็ได้
- ถ้าไม่สามารถฉีดยาในวันเดิมได้ทุกสัปดาห์ สามารถเลือกฉีดวันอื่นได้ แต่การฉีดยาแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 3 วัน
- ยานี้มาในรูปแบบปากกา ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดบริเวณต้นขา ต้นแขน หรือหน้าท้อง
- ห้ามฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ
- เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้งที่ฉีดยา เพื่อป้องกันเข็มอุดตัน
- ห้ามใช้ยานี้หากพบว่าปากกามีความเสียหาย หรือสารละลายในหลอดยาขุ่นหรือเปลี่ยนสี
- ตรวจสอบฉลากของปากกาทุกครั้งก่อนฉีดยา เพื่อป้องกันการใช้น้ำสลักกับยาตัวอื่น
- วิธีฉีดยา ศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อ “คำแนะนำการใช้วีโกวี”

3.2 **ถ้าลืมฉีดยาควรทำอย่างไร**

- ถ้าฉีดได้ภายใน 5 วัน** ให้ฉีดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แล้วฉีดยาครั้งต่อไปตามตารางการฉีดยา
- ถ้าฉีดได้หลังจาก 5 วัน** ให้ข้ามไปฉีดยาในครั้งถัดไปตามตารางการฉีดยา
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า เพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 **ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้ หากมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ อาเจียน

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดหรือปรับขนาดยาเอง ใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอาการอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ระหว่างใช้ยานี้ อาจจะทำให้มีอาการมึนงงได้ ให้หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหากมีอาการมึนงง
- ดื่มน้ำมากๆ เมื่อมีอาการอาเจียน หรือท้องเสีย เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ
- คุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 **อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
- ปวดท้องอย่างรุนแรง ปวดท้องร้าวมาที่หลัง
- ท้องผูกอย่างรุนแรงร่วมกับมีอาการปวดท้อง ท้องอืด อาเจียน

## “ให้ไปพบแพทย์ทันที”

5.2 **อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
- ท้องเสียหรือท้องผูก ปวดท้อง
- อาหารไม่ย่อย แน่นท้อง ท้องอืด เรอ
- แสงร่อนกลางอก กรดไหลย้อน
- การรับรสเปลี่ยนไป
- มึนงง
- ผมรั้ง
- บวม แดง ระคายเคืองบริเวณที่ฉีดยา
- อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ใจสั่น เหงื่อออก หิวมาก กระสับกระส่าย วิงเวียน เป็นลม
- อาการความดันต่ำ เช่น วิงเวียนเมื่อยืนหรือนั่ง
- หัวใจเต้นเร็ว

**“ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยาที่เปิดใช้แล้ว สามารถเก็บในตู้เย็นหรือเก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ได้นาน 6 สัปดาห์ หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- สวมปลอกปากกาไว้กับด้ามเสมอ เพื่อป้องกันยาจากแสง

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา** เป็นสารละลายใส ไม่มีสี บรรจุในหลอดขนาด 1.5 หรือ 3 มิลลิลิตร ในปากกาฉีดยา
- ตัวยาสำคัญ** คือ เซมากลูไทด์
- ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ ไดโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต, โพรพิลีนไกลคอล, ฟีนอล, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำสำหรับฉีด

**ผู้ผลิต** Novo Nordisk A/S, Bagsværd, Denmark

**ผู้นำเข้า** บริษัท ไนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย)

จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 31 กรกฎาคม 2567

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
https://ndi.fda.moph.go.th

<p><b>เซมากลูไทด์</b>  <b>ความแรง 0.68, 1.34, 2.27, 3.2 มิลลิกรัม</b>  <b>ต่อ 1 มิลลิลิตร</b>  <b>ชนิดสารละลายสำหรับฉีด</b>  <b>บรรจุในปากกาฉีดยา</b>  <b>ชื่อการค้า Wegovy® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 mg FlexTouch®</b>  <b>(วีโกวี® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 มิลลิกรัม</b>  <b>เฟล็กซ์ทัช®)</b></p>
--

## คำแนะนำการใช้วีโกรี

ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้ปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช แบบสัปดาห์ละครั้งของท่าน กรุณาอ่านคำแนะนำนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และปรึกษาวีธีฉีดวีโกรีที่ถูกต้องกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของท่าน

ปากกาวีโกรีเป็นปากกาที่สามารถหมุนตั้งขนาดยาได้ ซึ่งบรรจุยาวีโกรีตามขนาดที่แพทย์สั่งให้แก่ท่าน สำหรับการฉีดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้รวมทั้งหมดสี่ครั้ง

โปรดใช้ตารางด้านในฝากล่องเพื่อติดตามนับจำนวนครั้งที่ท่านได้ใช้ไปแล้วและจำนวนครั้งที่ยังเหลือฉีดได้ในปากกาของท่าน

วีโกรีอยู่ในรูปแบบปากกาฉีดยาที่มีห้าขนาดความแรงที่แตกต่างกัน ในปากกาแต่ละด้ามจะบรรจุยาเซมาไกลูไทด์หนึ่งในขนาดความแรงดังต่อไปนี้

0.25 mg

0.5 mg

1 mg

1.7 mg

2.4 mg

เริ่มจากการตรวจสอบฉลากบนปากกาของท่านเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปากกาที่มีวีโกรีตามขนาดความแรงที่แพทย์สั่งจ่ายท่าน

ปากกาของท่านได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเข็ม 30G, 31G และ 32G ชนิดใช้ครั้งเดียว ที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 8 มิลลิเมตร

ภายในกล่องประกอบด้วย:

- ปากกาวีโกรี
- เข็มฉีดยาโนโวฟายน์ พลัส 4 อัน
- เอกสารกำกับยา





## ปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช (ตัวอย่าง)

หมายเหตุ: ปากกาของท่านอาจมีขนาดและสีของฉลากแตกต่างไปจากที่แสดงในภาพ คำแนะนำนี้ใช้สำหรับปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช® ทุกขนาดความแรง



## เข็มโนโวฟายน์ พลัส (ตัวอย่าง)

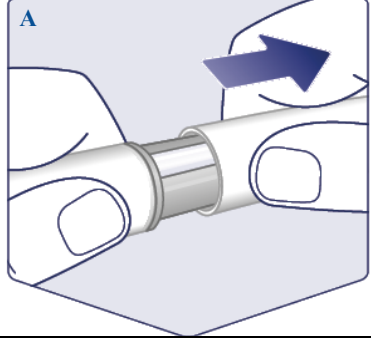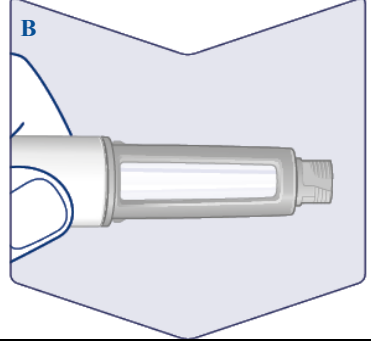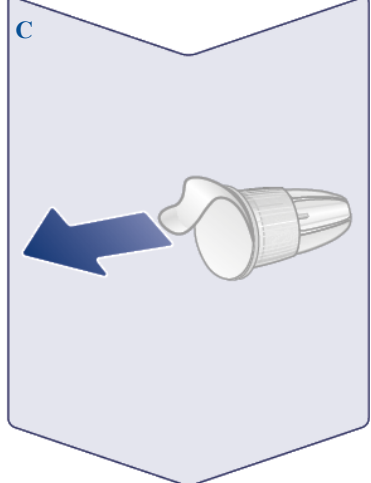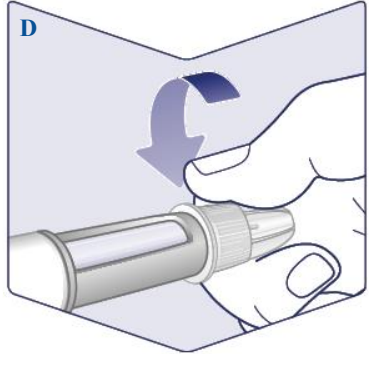

<p><b>1 เตรียมปากกาของท่านพร้อมกับเข็มฉีดยาอันใหม่</b></p> <p>ตรวจสอบข้อยาและขนาดความแรงของปากกาของท่านให้แน่ใจว่าเป็นวีโควีในขนาดความแรงตามที่แพทย์สั่งจ่ายให้ท่าน</p> <p><b>ดึงปลอกปากกาออก</b></p> <p>(ดูรูปภาพ A)</p>	
<p>ตรวจสอบสารละลายในปากกาของท่าน ซึ่งต้องเป็นสารละลายใสและไม่มีสี</p> <p>โดยดูที่ช่องมองสารละลายยาที่ด้ามปากกา ห้ามใช้ปากกาฉีดยานี้ ถ้าวีโควีมีลักษณะขุ่นหรือมีสี</p> <p>(ดูรูปภาพ B)</p>	
<p><b>ให้ใช้เข็มฉีดยาอันใหม่เสมอสำหรับการฉีดแต่ละครั้ง</b></p> <p>นำเข็มฉีดยาขึ้นมา เมื่อท่านพร้อมที่จะฉีดยา ตรวจสอบกระดาษปิดโคนเข็มและปลอกเข็มชั้นนอกกว่ามีความเสียหายใดหรือไม่ ซึ่งสามารถส่งผลต่อความปราศเชื้อ หากพบความเสียหาย ให้ใช้เข็มใหม่แทน</p> <p><b>ดึงแผ่นกระดาษปิดโคนเข็มออก</b></p> <p>(ดูรูปภาพ C)</p>	
<p><b>สวมเข็มเข้ากับปลายปากกาในทิศทางตรง หมุนให้แน่น</b></p> <p>(ดูรูปภาพ D)</p>	


**เข็มมีปลอกคลุมสองชั้น ท่านต้องถอดปลอกเข็มออกทั้งสองชั้น**  
หากท่านลืมถอดปลอกเข็มออกทั้งสองชั้นท่านจะไม่สามารถฉีดวีโก้ได้

**ดึงปลอกเข็มชั้นนอกออกและเก็บไว้ใช้ภายหลัง** ท่านจะต้องนำปลอกเข็มชั้นนอกกลับมาใช้เพื่อให้ถอดเข็มออกจากปากกาได้อย่างปลอดภัย หลังจากฉีดยาเสร็จแล้ว

**ดึงปลอกเข็มชั้นในออกและทิ้งไป** อาจเห็นหยดของวีโก้ที่ปลายเข็ม ท่านจะต้องตรวจสอบการไหลของวีโก้ ถ้าเป็นการใช้ปากกาตามใหม่ครั้งแรก ดูหัวข้อ 'ตรวจสอบการไหลของยาเมื่อจะใช้ปากกาตามใหม่แต่ละด้าม'

ห้ามใช้เข็มฉีดยาที่งอหรือชำรุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลจัดการเข็มฉีดยา ให้ดูหัวข้อ 'เกี่ยวกับเข็มฉีดยาของท่าน' ในส่วนที่ต่อจากคำแนะนำนี้

(ดูรูปภาพ E)

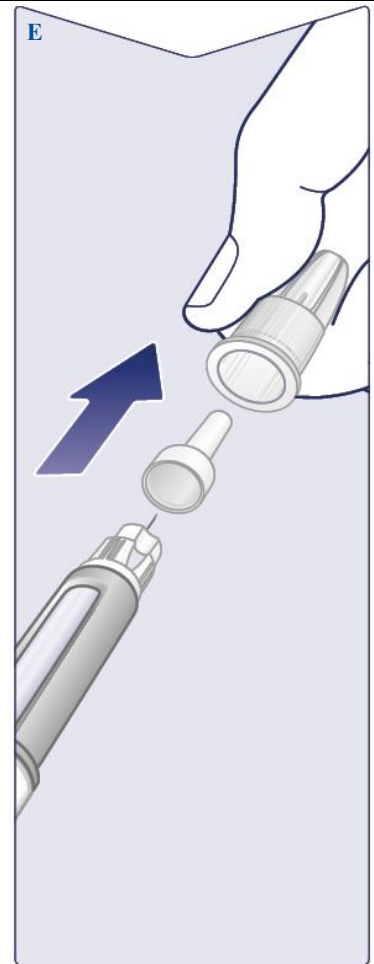

**การตรวจสอบการไหลของยาเมื่อจะใช้ปากกาตามใหม่แต่ละด้าม**  
หากปากกาวีโก้ของท่านได้มีการใช้อยู่แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ '2 การตั้งขนาดยา'

ตรวจสอบการไหลของวีโก้ก่อนการใช้ปากกาตามใหม่ฉีดในครั้งแรกเท่านั้น

หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนช่องแสดงขนาดยาตรงกับสัญลักษณ์ที่ตรวจสอบการไหลของยา (■ ■ ▬)

(ดูรูปภาพ F)



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ที่ตรวจสอบการไหลของยาอยู่ตรงกับ  
ขีดบอกขนาดยา

(ดูรูปภาพ G)



### การตรวจสอบการไหลของยา

ถือปากกาให้อยู่ในแนวตั้ง ปลายเข็มชี้ขึ้น

**กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนช่องแสดงขนาดยากลับมาที่ 0-  
ขีดบอกขนาดยาต้องอยู่ตรงกับเลข 0-**

ควรมองเห็นหยดยาวิโครีที่ปลายเข็ม การมองเห็นหยดยานี้แสดงว่า  
ปากกาของท่านพร้อมใช้แล้ว

หากไม่มีหยดยาออกมาที่ปลายเข็ม ให้ตรวจสอบการไหลของยา  
อีกครั้ง การตรวจสอบนี้ควรทำเพียงสองครั้งเท่านั้น

หากยังไม่เห็นหยดยาออกมา ให้เปลี่ยนเข็มและตรวจสอบการไหล  
อีกครั้งหนึ่ง

**ห้ามใช้ปากกา**นี้ หากไม่มีหยดยาวิโครีออกมาที่ปลายเข็ม

(ดูรูปภาพ H)



## 2 การตั้งขนาดยา

หมันวงแหวนตั้งขนาดยาจนกระทั่งช่องแสดงขนาดยาหยุดเคลื่อน และแสดงขนาดยาตามแพทย์สั่ง

(ดูรูปภาพ I)




เส้นประ (|) ในช่องแสดงขนาดยาจะนำท่านไปยังขนาดยาของท่าน

เมื่อหมันวงแหวนตั้งขนาดยาจะมีเสียงคลิก ซึ่งเสียงคลิกนี้จะแตกต่างกันไปเมื่อหมุนไปข้างหน้า ถอยหลัง หรือหมุนผ่านขนาดยาของท่าน ท่านจะได้ยินเสียง 'คลิก' ทุกครั้งที่ท่านหมันวงแหวนตั้งขนาดยา

ห้ามตั้งขนาดยาโดยการนับเสียงคลิกที่ท่านได้ยิน

(ดูรูปภาพ J)

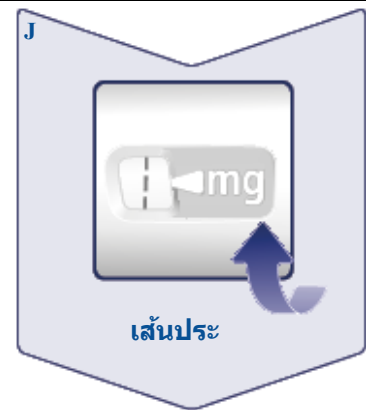

เมื่อตัวเลขขนาดยาตามแพทย์สั่งเคลื่อนมาตรงกับขีดบอกขนาดยา หมายถึงท่านเลือกขนาดยานั้น ในภาพแสดงขนาด **0.25 mg** เป็นตัวอย่าง

หากช่องแสดงขนาดยาหยุดเคลื่อนก่อนถึงขนาดยาตามแพทย์สั่ง ให้ไปดูหัวข้อ 'ท่านมีวิโกรีอยู่เพียงพอหรือไม่?' ในส่วนที่ต่อจากคำแนะนำนี้


(ดูรูปภาพ K)



### เลือกตำแหน่งที่ฉีดยา

เลือกบริเวณต้นแขน ต้นขา หรือ หน้าท้อง (เว้นระยะห่างจากสะดือประมาณ 5 เซนติเมตร)

ท่านอาจฉีดบริเวณเดิมได้ในแต่ละสัปดาห์ แต่ไม่ควรฉีดตรงจุดเดียวกับที่ฉีดครั้งที่แล้ว

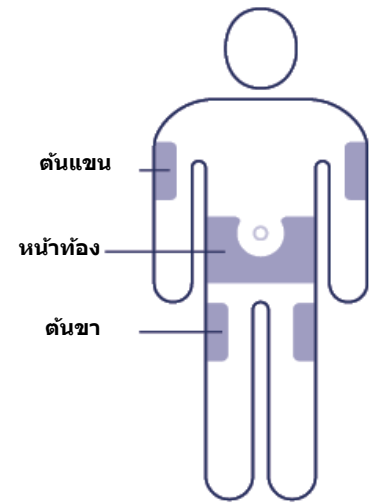


### 3 การฉีดยา

แทงเข็มฉีดยาลงบนผิวหนังของท่าน

ต้องแน่ใจว่าท่านสามารถมองเห็นช่องแสดงขนาดยา ระวังอย่าให้นิ้วมือของท่านบดบังช่องแสดงขนาดยา เพราะอาจขัดขวางการฉีดยาได้

(ดูรูปภาพ L)

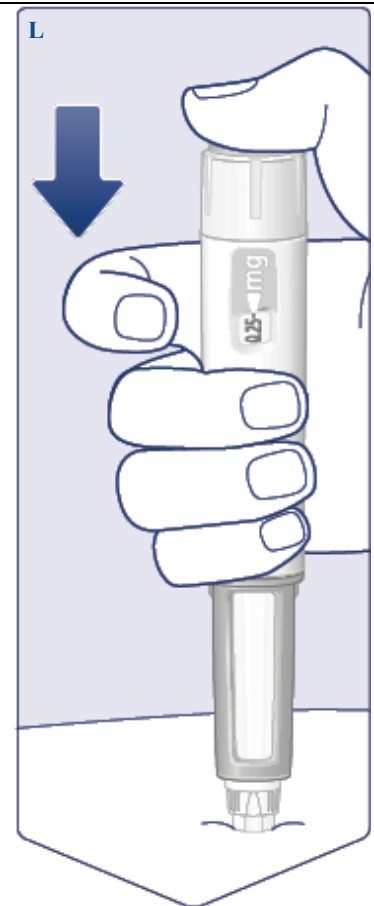


**กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนช่องแสดงขนาดยาแสดงเลข 0**

(ดูรูปภาพ M)

**กดปุ่มฉีดยาค้างไว้ให้เข็มคาใต้ผิวหนังและนับ 1 ถึง 6 ซ้ำๆ**  
ช่องแสดงขนาดยาจะตั้งแสดงตัวเลข 0 ตรงกับขีดบอกขนาดยา  
ท่านอาจรู้สึกหรือได้ยินเสียงคลิกเมื่อช่องแสดงขนาดยากลับมา  
แสดงเลข 0

(ดูรูปภาพ N)

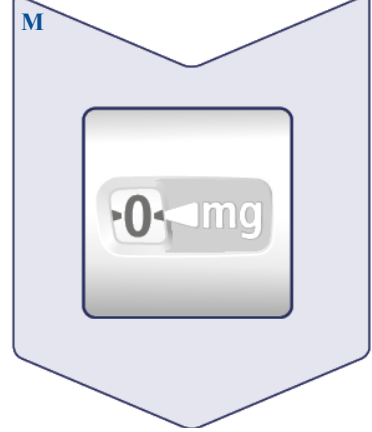


**ดึงเข็มฉีดยาออกจากผิวหนังของท่าน** หากท่านดึงเข็มออกก่อน  
อาจมีวิโควีไหลออกจากปลายเข็มเป็นสาย และท่านจะได้รับยา  
ไม่ครบตามขนาด

ถ้ามีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยา ให้กดปิดไว้เบาๆเพื่อห้ามเลือด

ท่านอาจเห็นหยดวิโควีที่ปลายเข็มหลังจากการฉีดได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ  
และไม่มีผลต่อขนาดยาที่ท่านได้รับ

(ดูรูปภาพ O)

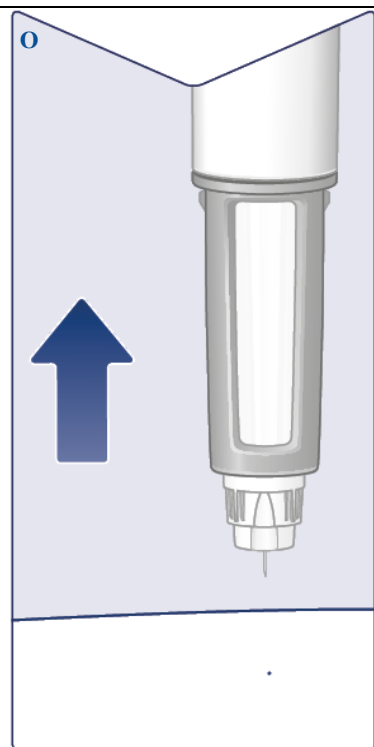




#### 4 หลังการฉีดยา

สอดปลายเข็มเข้าไปในปลอกเข็มชั้นนอกที่วางบนพื้นราบ โดยท่านต้องไม่สัมผัสกับเข็มหรือปลอกเข็มชั้นนอก

เมื่อเข็มถูกรอบด้วยปลอกเข็มชั้นนอกแล้ว ให้กดปลอกเข็มชั้นนอกอย่างระมัดระวังจนปิดสนิท

(ดูรูปภาพ P)

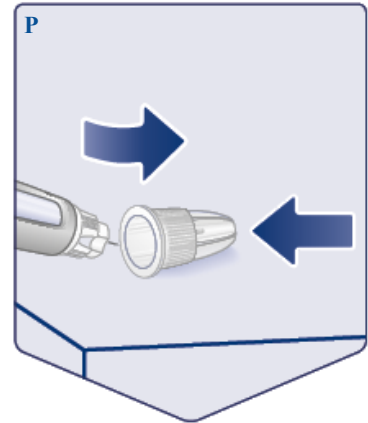



คลายเกลียวเพื่อถอดเข็มออกและนำไปทิ้งด้วยความระมัดระวัง ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในท้องถิ่นของท่าน

ห้ามพยายามสวมปลอกเข็มชั้นในเข้ากับเข็ม เพราะท่าน อาจถูกเข็มทิ่มตำได้

ควรถอดเข็มทิ้งทันทีภายหลังการฉีดแต่ละครั้งเพื่อป้องกัน เข็มอุดตัน การปนเปื้อน การติดเชื้อ และการได้รับยาในขนาด ที่ไม่ถูกต้อง ห้ามเก็บปากกาโดยที่ยังมีเข็มติดอยู่

(ดูรูปภาพ Q)

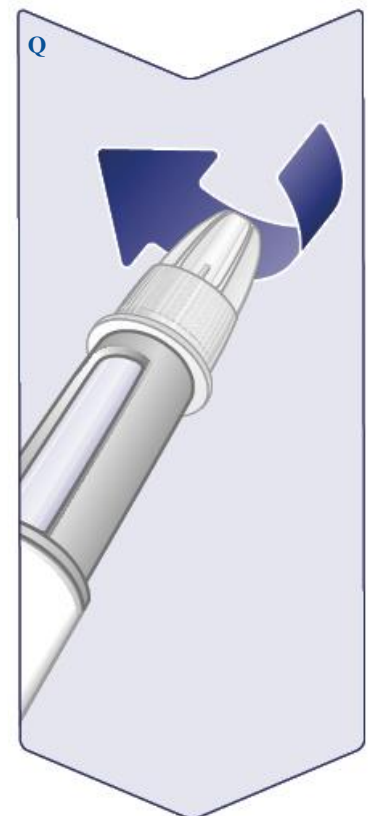

<p><b>สวมปลอกปากกาหลังการฉีดแต่ละครั้งให้เพื่อป้องกันไวรัสจากแสง</b> (ดูรูปภาพ R)</p>	
<p>เมื่อยาในปากกาหมดแล้ว ให้ทิ้งปากกาไปโดยต้องไม่มีเข็มติดอยู่ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของท่าน</p> <p>ปลอกปากกาและกล่องเปล่าสามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนของท่านได้</p>	
<p><b>เกี่ยวกับเข็มฉีดยาของท่าน</b></p>	
<p><b>วิธีตรวจสอบเข็มที่อุดตันหรือชำรุด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากช่องแสดงขนาดยาไม่แสดงเลข <b>-0-</b> หลังจากที่ถูกปั๊มฉีดยาค้างไว้ แสดงว่าท่านอาจใช้เข็มที่อุดตันหรือชำรุด</li> <li>ซึ่งแสดงว่า ท่านยัง<b>ไม่</b>ได้รับไวรัส แม้ว่าช่องแสดงขนาดยาจะเคลื่อนจากขนาดยาเดิมที่ท่านตั้งไว้ก็ตาม</li> </ul> <p><b>วิธีจัดการกับเข็มที่อุดตัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้เปลี่ยนเข็มตามที่แนะนำในหัวข้อที่ <b>'1 เตรียมปากกาของท่านพร้อมกับเข็มฉีดยาอันใหม่'</b> และไปหัวข้อที่ <b>'2 การตั้งขนาดยา'</b></li> </ul>	
<p><b>การดูแลปากกาของท่าน</b></p>	
<p>ให้ดูแลรักษาปากกาของท่านด้วยความระมัดระวัง การใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือใช้ผิดวิธีอาจทำให้ได้รับยาในขนาดที่ไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนั้น ท่านอาจ<b>ไม่</b>ได้รับผลการรักษาที่ต้องการจากไวรัส</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ดูด้านหลังของเอกสารนี้เพื่ออ่านคำแนะนำสถานะการเก็บรักษาปากกาของท่าน</li> <li><b>ไม่ฉีดไวรัสที่ผ่านการสัมผัสแสงแดดโดยตรง</b></li> <li><b>ไม่เก็บไวรัสในช่องแช่แข็งและห้ามฉีดไวรัสที่ผ่านการแช่แข็ง</b> ให้ทิ้งปากกานั้นไป</li> <li><b>ห้ามทำปากกาดกหรือเคาะกับของแข็ง</b></li> <li><b>ห้ามพยายามบรรจุยาเข้าไปในปากกาของท่าน</b> เมื่อยาในปากกาหมด จะต้องทิ้งปากกานั้น</li> </ul>	

- ห้ามพยายามซ่อมปากกาของท่านหรือดึงชิ้นส่วนปากกาออกจากกัน
- เก็บปากกาฉีดยาของท่านให้พ้นจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก หรือของเหลว
- ห้ามล้าง แช่ หรือ ใช้สารหล่อลื่นกับปากกาฉีดยาของท่าน หากจำเป็น ให้เช็ดทำความสะอาดปากกาด้วยผ้าหมาดที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน

#### ท่านมีวีโครีอยู่เพียงพอหรือไม่?

หากช่องแสดงขนาดยาหยุดก่อนถึงขนาดยาของท่านตามที่แพทย์สั่ง แสดงว่าวีโครีที่เหลืออยู่นั้นมีปริมาณไม่ครบตามขนาดที่ต้องการ ให้ทิ้งปากกานั้นและใช้ปากกาวีโครีตัวใหม่



#### ข้อมูลสำคัญ

- วีโครีใช้ฉีดเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้น หากท่านไม่ใช้วีโครีตามที่แพทย์สั่ง ท่านอาจไม่ได้รับผลการรักษาที่ต้องการจากยานี้
- หากท่านต้องฉีดยามากกว่าหนึ่งชนิด เป็นสิ่งสำคัญมากที่ท่านจะต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดความแรงบนฉลากปากกาก่อนใช้
- ท่านไม่ควรใช้ปากกานี้โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ หากท่านมีสายตาไม่ดีและไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ได้ ท่านควรขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีสายตาดีที่ได้รับการอบรมวิธีใช้ปากกาวีโครีแล้ว
- ควรเก็บปากกาและเข็มฉีดยาให้พ้นจากสายตาและพันมือผู้อื่นเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเด็ก
- ห้ามใช้ปากกาและเข็มฉีดยาของท่านร่วมกับผู้อื่น
- เข็มฉีดยาเป็นเข็มสำหรับการใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามนำเข็มของท่านกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากเข็มอาจอุดตัน มีการปนเปื้อน การติดเชื้อ และฉีดยาได้ในขนาดที่ไม่ถูกต้อง
- ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยจะต้องใช้เข็มด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการถูกเข็มทิ่มตำและการติดเชื้อ